

Micro Centrifuga Refrigerada Kubota modelo 3520.

Made in
JAPAN



Microcentrífuga Refrigerada 3520




Rotor MA-2024

Especificaciones Técnicas:

- Velocidad máxima: 15,000 rpm
- RCF máxima: 20,630 xg
- Capacidad máxima: 48 mL
- Rango de temperatura: -9 a +40°C
- Sistema de Control: Mediante Microprocesador
- Motor de inducción directa: Libre de mantenimiento (sin carbones)

Características Generales

- Permite tubos desde 0.2mL PCR hasta microtubos de 5mL (según rotores que se incluyan)
- Para 24 tubos de 1.5/2mL se debe incluir rotor angular modelo MA-2024 + tapa
- Aceleración y desaceleración en 14 segundos (usando el rotor MA-2024)
- La temperatura de la muestra se puede mantener a 4 °C con una función de ajuste de temperatura
- Función de parpadeo de memoria para un fácil giro hacia abajo (patentado)
 - La tapa se abrirá automáticamente después de que se complete el proceso de parpadeo.
- Panel de fácil control de usar con mandos de control grandes.
- La ventilación de escape se encuentra en el fondo de la parte superior de la centrífuga para minimizar la contaminación y el molesto escape aire.
- Diseño que ahorra espacio con un ancho de 29 cm y una profundidad de 48,4 cm
- " Modo Eco" seleccionable:
 - Cuando se deja sin usar durante 10 minutos, el congelador se detendrá automáticamente y la pantalla se apagará.
 - Bajo consumo de energía de aprox. 35 W en modo de ahorro de energía.

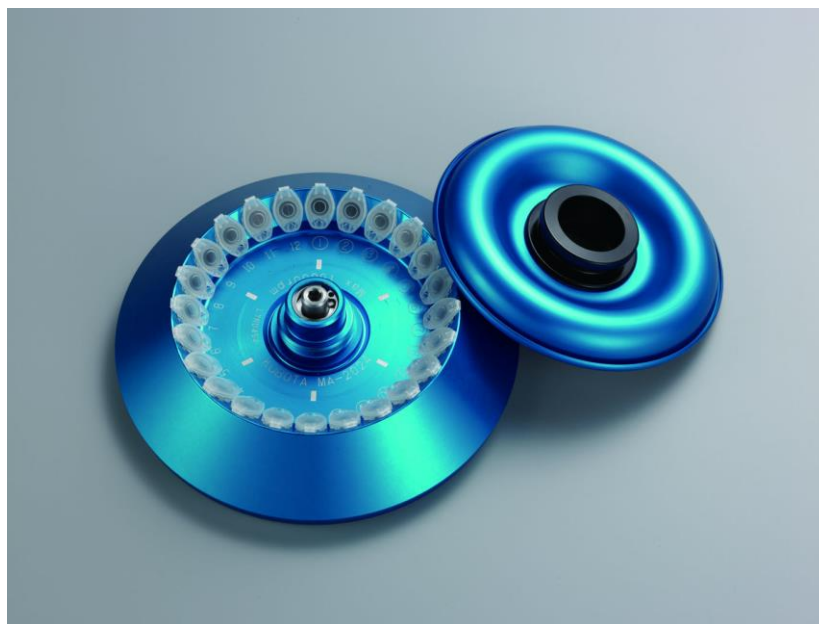

Rotor MA-2024 con tapa