


Cucharones Doble-Uso

El cucharón de doble uso de Heathrow Scientific ofrece una solución económica única cual combina la función de un cucharón y navecilla de pesaje en un solo producto. El proceso de pesaje se ha racionalizado, ahora simplemente tome la muestra o retire el material en el cucharón y colóquelo directamente sobre la balanza. Eliminando la necesidad de navecillas de pesaje o papel de pesaje y ahorra espacio valioso en el laboratorio. Al terminar el cucharón de doble uso es descartable.

- Fabricado de Poliestireno antiestático que es impermeable y reduce la posibilidad de que materiales se peguen al cucharón
- Se embarcan y almacenan planos y cuando listos para utilizar, son fácil de montar insertando la lengüeta de fijación en el agujero
- La característica de la lengüeta de fijación permite la forma de cucharón cual ayuda a retener materiales
- El diseño angosto sobre la extremidad mantiene el cucharón estable mientras en la balanza y permite que materiales fácilmente se obtengan y dispensen
- El cucharón se puede usar plano como alternativa para papel de pesaje

No. Parte	Tamaño	L x A (punto más ancho)	A (punto más angosto)	Color	UdM
120656	Grande	5 x 3.5 pulg.	12.7 x 9 cm	2.5 pulg. 6.4 cm	Blanco <input type="checkbox"/> 100/pqt. 50pqt./caja
120657	Pequeño	5 x 2.5 pulg.	12.7 x 6.3 cm	1.7 pulg. 4.3 cm	

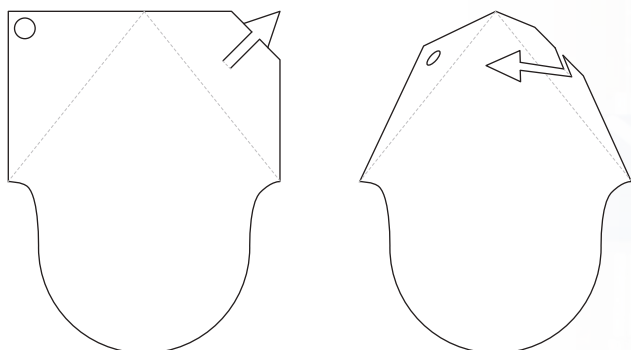

Ensamble fácilmente tirando la lengüeta de la flecha por el agujero.

