

Gradilla PCR® de Temperatura Baja de 96-Pozos


Desliza, Establece, Trabaja, y Almacena Muestras de PCR

La gradilla de almacenaje PCR, por Heathrow Scientific, ofrece un diseño acicalado y moderno completa de distintivos. El diseño pendiente patente ofrece una tapa de la cual la gradilla se desliza por debajo, y luego se gira 180° y se convierte en una repisa en donde la gradilla se puede montar. Textura ergonómica sobre los dedos proporciona un asimiento seguro reduciendo la posibilidad que la gradilla PCR se caiga, y facilita el manejo y transporte, especialmente cuando se usa guantes. La tapa tiene apertura sobre los lados cual permite que las muestras se enfrien más rápido para asegurar la integridad y está hecho de policarbonato transluciente facilitando la identificación de muestras y pozos.

La base de la gradilla PCR es construida de robusto ABS cual mantiene las muestras seguras para que no tengas que perder tiempo y hacer gastos adicionales en rehacer pruebas. La locación de identificación de números y letras permite que las muestras estén organizadas resultando en recuperación fácil y rápida. La gradilla PCR cuenta con un diseño de base cerrada cual ayuda con la integridad de las muestras manteniéndolas frías más tiempo.

La gradilla de almacenaje PCR es versátil; se puede usar en la mesa de trabajo o almacenar en congelador. La huella es compacta y apilable, cual ayuda a horrar espacio valioso en el laboratorio. La gradilla de almacenaje PCR se ofrece en múltiple de colores para opciones de codificación.

- La tapa es ambidiestra; se puede cambiar para adaptarse a orientación izquierda o derecha
- La tapa es desmontable
- Capacidad para tubos de 0.2mL, individuales o tira
- 96 pozos, configuración de 8 x 12
- Se puede usar para almacenaje en congelador hasta -80°C (-112°F)

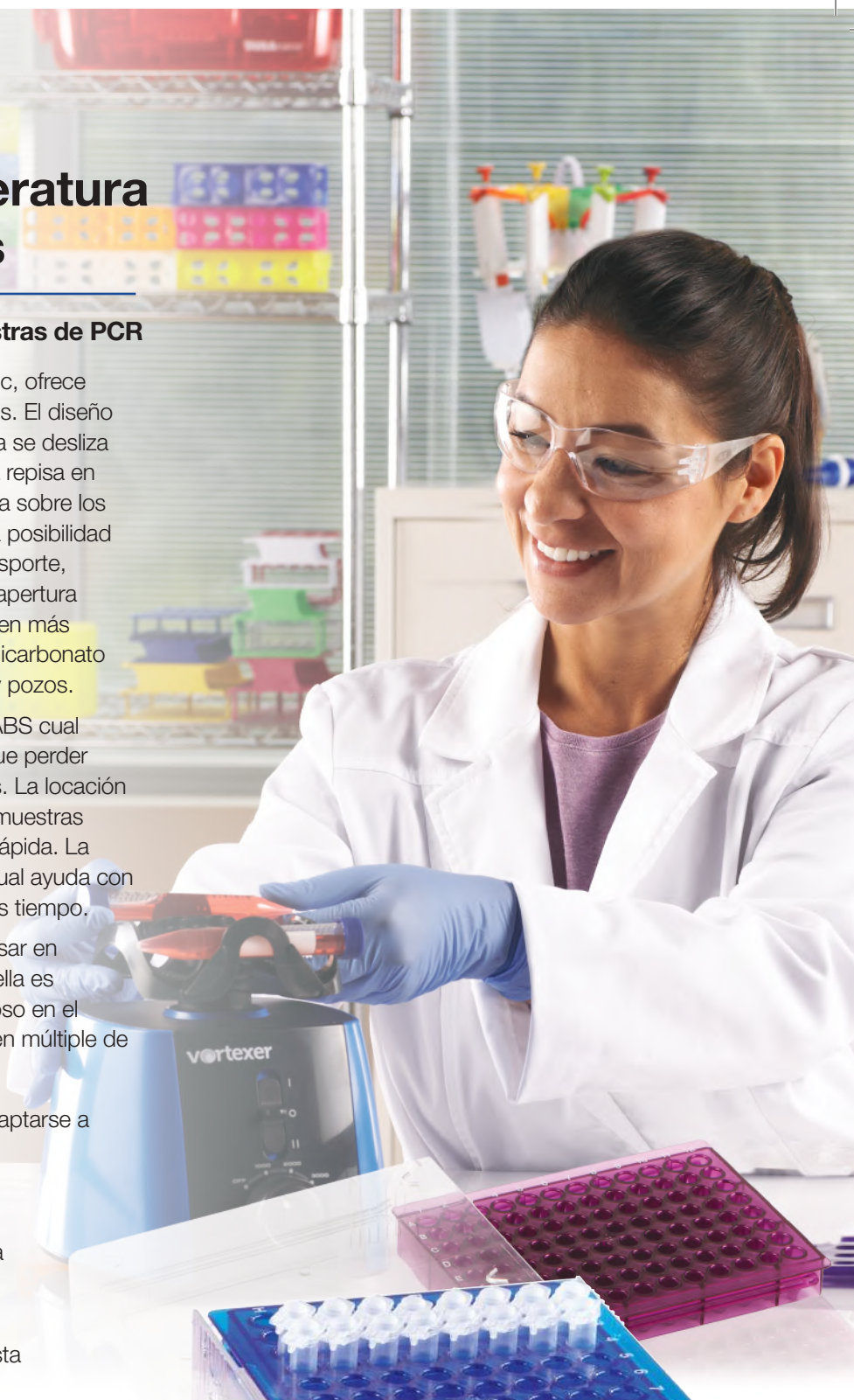


No. Parte	Tubos	Pozos	Día. Pozo	L x A x A	Pqt.	Color
HS120538	0.2mL	96	5.2mm	12.5 cm x 9.2 cm x 3.7 cm (4.9 x 3.6 x 1.5 in)	5/pk	Colores surtidos
HS120539	0.2mL	96	5.2mm	12.5 cm x 9.2 cm x 3.7 cm (4.9 x 3.6 x 1.5 in)	5/pk	Azul
HS120540	0.2mL	96	5.2mm	12.5 cm x 9.2 cm x 3.7 cm (4.9 x 3.6 x 1.5 in)	5/pk	Verde
HS120541	0.2mL	96	5.2mm	12.5 cm x 9.2 cm x 3.7 cm (4.9 x 3.6 x 1.5 in)	5/pk	Morado

*Patente Pendiente



Desliza, Fija, Trabaja, y Almacena

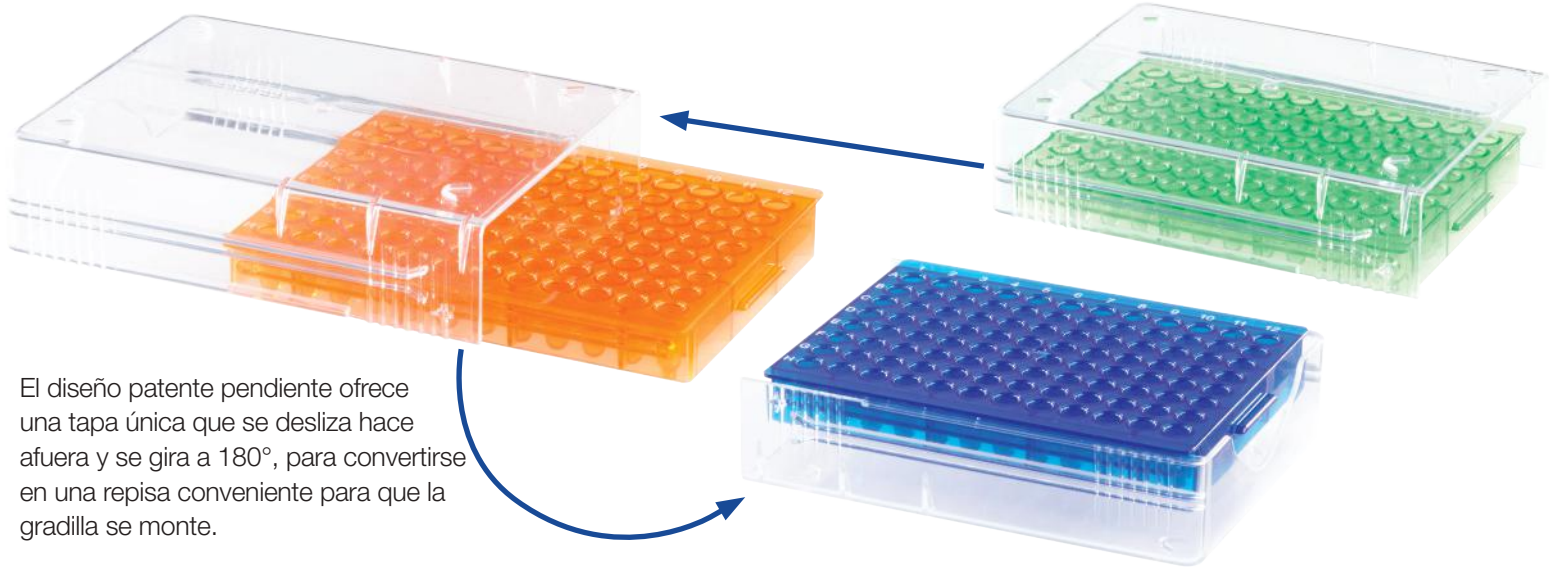

Innovative Design

